

Für einen zuverlässigen Verschluss.

Eins-zu-eins-Rotation für eine
präzise Positionierung und ein
gewebegreifendes Design für
einen sicheren Verschluss



Instinct Plus[®]
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE



Der Instinct Plus endoskopische Clip-Applikator wurde für einen reibungsloseren Betrieb und eine reaktionsschnelle Handhabung überarbeitet¹ und kombiniert Stärke mit der Einfachheit der Anwendung in einem Schritt.

Stärke und Sicherheit

- Starke Retention des Clips^{2,3}
- Mehrere Verankerungsspitzen am Clip helfen beim Ziehen und Halten des Gewebes
- Mit Nitinol, einer superelastischen Legierung mit Formgedächtnis, verstärkte Clips

Reaktionsschnelle Handhabung

- Einstellbare Clip-Spanne, die sich bis zu 16 mm weit öffnet
- Eins-zu-eins-Drehung vom Griff zur Spitze
- Kann bis zu fünfmal geöffnet und geschlossen werden, um die Position zu verändern

Vielseitigkeit

- Kompatibilität mit vorwärts und seitwärts gerichteten Endoskopen
- Indikation zum Defektverschluss und zur Hämostase sowie zur Fixierung von Jejunal-Ernährungs sonden und selbstexpandierenden Metallstents für die Speiseröhre (Einzelheiten siehe vollständige Anwendungsgebiete)

1. Data on file. Force and throw at handle to approximate tissue and to open clip (with tissue) for Instinct generation 2. Test report 800008-35-R. 13. September 2019.
2. Ponugoti PL, Rex DK. Clip retention rates and rates of residual polyp at the base of retained clips on colorectal EMR sites. *Gastrointest Endosc.* 2017;85(3):530-534.
3. Data on file. Deployed tip tissue dislodgement force post procedure (force of clip retention at tissue) and force of clip compression at tissue for Instinct generation 2. Test report 800008-10-R. August 8, 2019.

Instinct Plus®



ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

Bedingt MR-sicher



Ein Patient mit diesem Clip kann sofort und sicher in einem MR-System gescannt werden, das die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Räumliches Magnetfeld von 3,0 oder 1,5 T
- Maximaler spezieller Feldgradient von 1.900 G/cm (19 T/m)
- Maximales MRT-System, gemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) des ganzen Körpers von 2,0 W/kg

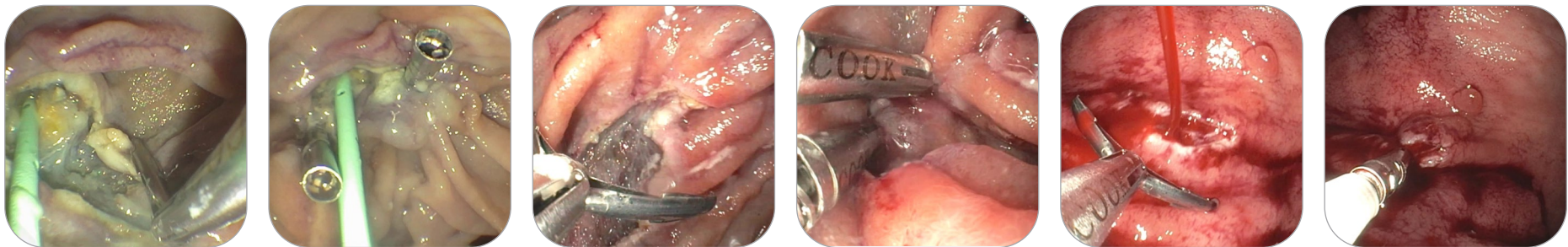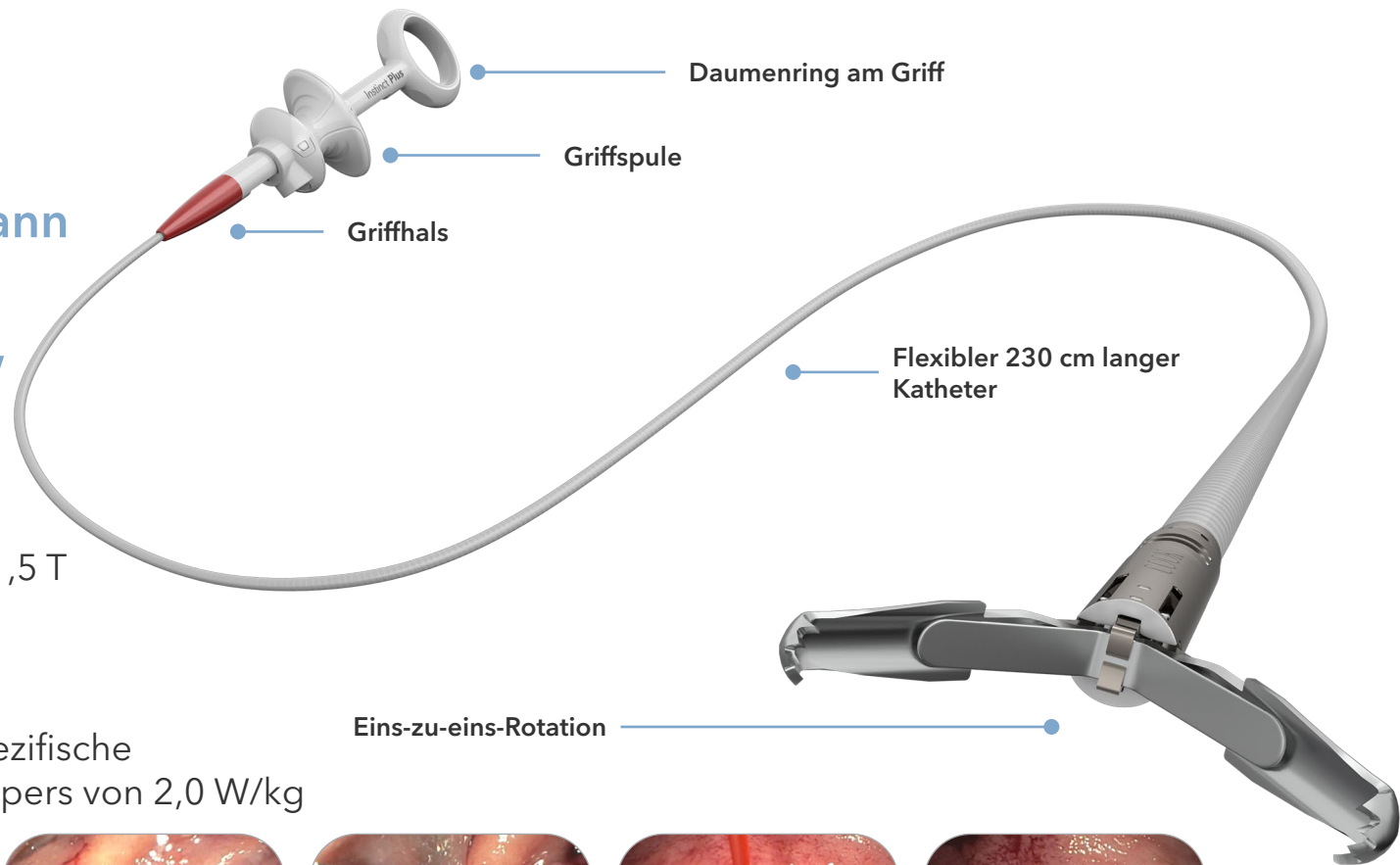

Bildnachweis: Dr. Shou Jiang Tang, the University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS

Der Instinct Plus endoskopische Clip-Applikator wird für die endoskopische Clip-Positionierung im Gastrointestinal-Trakt für folgende Zwecke eingesetzt:

- Endoskopische Markierung
- Hämostase für:
 - › Schleimhaut-/Submukosadefekte weniger als 3 cm
 - › Blutende Geschwüre
 - › Arterien weniger als 2 mm
 - › Polypen mit einem Durchmesser von weniger als 1,5 cm
 - › Divertikel im Dickdarm und
 - › Prophylaktisches Clipping zur Verringerung des Risikos einer verzögerten Blutung nach Resektion der Läsion
- Verankerung von Jejunal-Ernährungs sonden an der Dünndarmwand
- Als ergänzende Methode zum Verschluss luminaler Perforationen des GI-Trakts von weniger als 20 mm, die konservativ behandelt werden können
- Verankerung zur Befestigung von vollständig abgedeckten selbstexpandierenden Metallstents an der Speiseröhrenwand bei Patienten mit Fisteln, Leaks, Perforationen oder Disunion

Bestellnummer	Referenznummer	Breite der Clip-Öffnung mm	Katheter mit Fr-Größe	Katheterlänge cm	Menge	MR-Status	Minimaler Durchmesser des vorwärtsgerichteten Sichtarbeitskanals mm	Minimaler Durchmesser des seitlichen Sichtarbeitskanals mm
G58010	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	Bedingt MR-sicher	2,8	4,2

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.



Customer Service

EU Website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:


Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

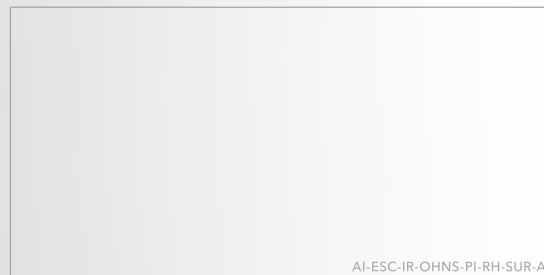

AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4

